

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Não realize a expiração forçada com o inalador na boca.
- Na inalação de determinados fármacos (corticóides), deve lavar a boca após a inalação. Converse com o médico sobre esta necessidade.
- Não guarde o inalador na casa de banho.
- Não lave o inalador com água nem limpe com pano húmido.
- Após cada utilização, limpe o bocal com um lenço de papel.



BREEZHALER®

INFORMAÇÕES ÚTEIS

O inalador **Breezhaler®** é um dispositivo que permite administrar fármacos diretamente nas vias aéreas inferiores, através da sua inalação.

A via inalatória é a via de eleição para a administração de fármacos no tratamento das doenças respiratórias, pois permite:

- ✓ Ação terapêutica mais rápida;
- ✓ Maior eficácia;
- ✓ Utilização de doses menores de fármaco;
- ✓ Menos efeitos adversos.

A eficácia do tratamento depende da correta utilização do dispositivo de inalação.


Traga o seu inalador sempre que vier à consulta, assim poderemos melhorar o seu uso e tratar melhor a sua doença.




**ESCLAREÇA TODAS AS DÚVIDAS COM O SEU
MÉDICO / ENFERMEIRO DE FAMÍLIA!**

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


1. Deve estar de pé ou sentado. Retire a tampa de proteção do dispositivo e levante o bocal.

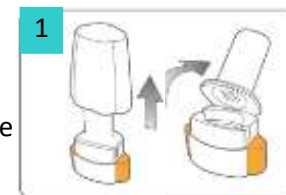


2. Coloque a cápsula no compartimento e feche novamente o bocal.

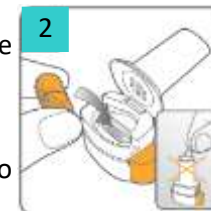

3. Com o dispositivo em posição vertical, carregue ao mesmo tempo em ambos os botões laterais (para perfurar a cápsula). Deve ouvir um “clique”.

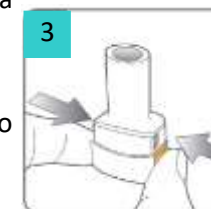


4. Expire lentamente, o máximo que conseguir, afastado do inalador.

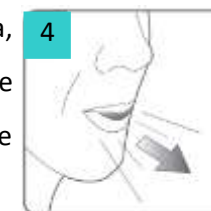

5. Coloque o dispositivo em posição horizontal na boca, entre os dentes, sem obstruir o bocal com a língua, e aperte bem os lábios de forma a selar e evitar saídas de ar.


6. Inspire de forma rápida e vigorosa pela boca (deve ouvir um zumbido).

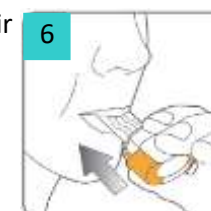

7. Suspenda a respiração durante 5 - 10 segundos.

8. Expire lentamente.

9. Abra o bocal, tire a cápsula usada e verifique se está vazia.

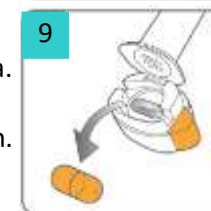

NOTA: Se for prescrito mais do que 1 *puff* aguarde 1 min. para a nova inalação e repita os passos anteriores.