

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Fique atento ao contador de doses, para adquirir uma nova embalagem.
- Enquanto utiliza o inalador, a câmara lateral irá encher gradualmente com fita usada. Não deve haver mais de 3 seções de fita de alumínio na câmara, pois podem causar a obstrução do inalador. Rasgue a fita com cuidado, contra o "dente" de lado da câmara. A fita não deve ser puxada ou arrancada.
- Não realize a expiração forçada com o inalador na boca.
- Na inalação de determinados fármacos (corticóides), deve lavar a boca após a inalação. Converse com o médico sobre esta necessidade.
- Não guarde o inalador na casa de banho.
- Não lave o inalador com água nem limpe com pano húmido.
- Após cada utilização, limpe o bocal com um lenço de papel.



FORSPIRO®

INFORMAÇÕES ÚTEIS

O inalador **Forspiro®** é um dispositivo que permite administrar fármacos diretamente nas vias aéreas inferiores, através da sua inalação.

A via inalatória é a via de eleição para a administração de fármacos no tratamento das doenças respiratórias, pois permite:

- ✓ Ação terapêutica mais rápida;
- ✓ Maior eficácia;
- ✓ Utilização de doses menores de fármaco;
- ✓ Menos efeitos adversos.

A eficácia do tratamento depende da correta utilização do dispositivo de inalação.


Traga o seu inalador sempre que vier à consulta, assim poderemos melhorar o seu uso e tratar melhor a sua doença.



**ESCLAREÇA TODAS AS DÚVIDAS COM O SEU
MÉDICO / ENFERMEIRO DE FAMÍLIA!**

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Deve estar de pé ou sentado. Abra a tampa do inalador.
2. Levante a alavanca branca até dar um estalido.
3. Volte a fechar a alavanca branca (deve ouvir um “clique”).
4. Expire lentamente, o máximo que conseguir, afastado do inalador.
5. Coloque o dispositivo em posição horizontal e com a tampa para baixo na boca, entre os dentes, sem obstruir o bocal com a língua, e aperte bem os lábios de forma a selar e evitar saídas de ar.
6. Inspire de forma rápida e vigorosa pela boca.
7. Retire o inalador da boca e suspenda a respiração durante 5 - 10 segundos.
8. Expire lentamente.
9. Volte a fechar a tampa.

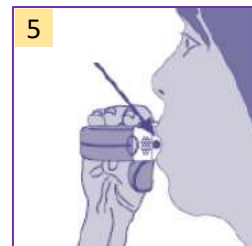

NOTA: Se for prescrito mais do que 1 *puff* aguarde 1 min. para a nova inalação e repita os passos anteriores.